



Hotte à suspendre

HI9P


Traitement des solvants et fumées
 Manipulation de produits
 Captation de vapeurs

Caractéristiques Techniques

Débit Variable	De 50 à 450 m ³ /h
Puissance	80 W
L x P x H mm	720 x 640 x 300
Poids	8 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du filtre
Sortie Arrière	Oui, évacuation ext Ø125 mm

Ses avantages

Libère le poste de travail
 Importante surface d'aspiration

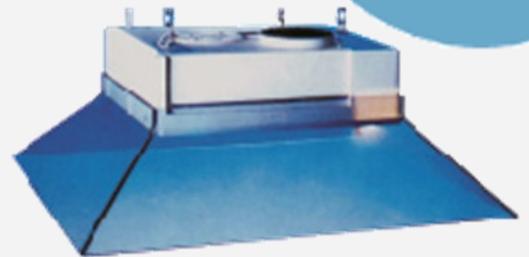

Utilisation

En recyclage : Filtration au charbon actif ou filtre poussières

En rejet extérieur : Filtre rejet extérieur + gaine d'évacuation Ø 125 mm



Option :

Visière spéciale munie d'une découpe périphérique pour fixation d'un kit lanière en PVC souple (réf HI9PKL). Hauteur 970 mm, sur 4 faces.

La hotte suspendue permet ainsi de cantonner tout le volume au dessus du plan de travail.

Mise en place du kit grâce à un système simple et léger permettant tout type de configuration

