

## Hotte cabine – HI5VPP


 Les hottes cabines sont utilisées pour les besoins de filtration nécessitant un cantonnement de l'espace, tels que le nettoyage au solvant, machines dégageant de fortes fumées, application en aérosol (spray ou pistolet), manipulation de produits chimiques, vernissage, étamage etc.



- ✓ Cabine munie d'un groupe aspirant
- ✓ Montage facile, aisément démontable et déplaçable
- ✓ Profilés aluminium satiné
- ✓ Remplissage : verre trempé 6 mm et mélaminé blanc 19 mm
- ✓ Eclairage incorporé
- ✓ Porte relevable avec passage de mains de 200 mm

### Caractéristiques techniques


Débit variable	50 à 450 m <sup>3</sup> /h
Puissance	80 W
L x H x P	800 x 700 x 700 mm
Poids	33 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du filtre
Evacuation extérieure	Oui, Ø125 mm

 Cabine utilisée en recyclage interne grâce à son filtre à charbon actif ou un filtre à particules  
Peut être utilisée en rejet extérieur avec un filtre à poussières et une gaine d'évacuation  
Possibilité d'utiliser des préfiltres pour prolonger la vie du filtre à charbon actif


## Hotte cabine sans porte – HI5VP



La cabine HI5VP peut se décliner en différentes largeurs

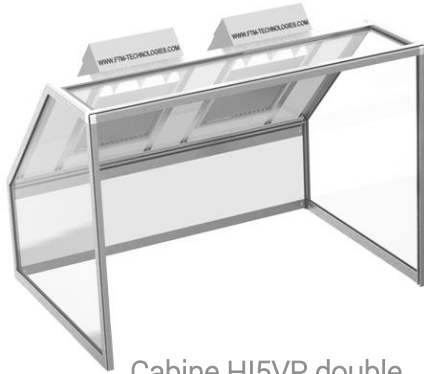

Cabine HI5VP double

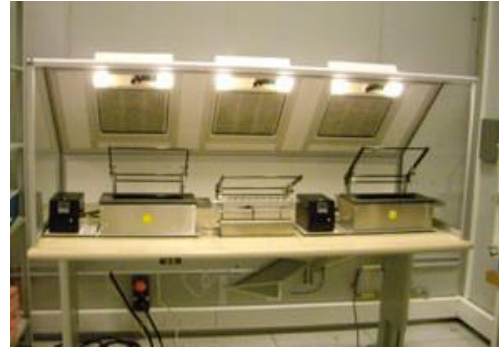

Cabine HI5VP triple

Options disponibles pour la HI5VP




Option bandeau



Option porte relevable



Option porte ouvrant à la française

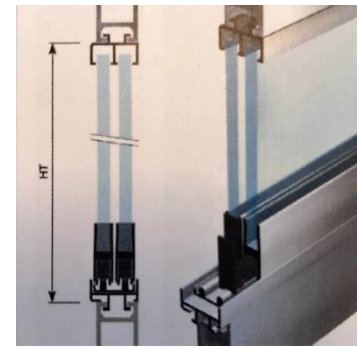

Option porte coulissante

Hotte cabine – HI6VP



- ✓ Cabine munie d'un groupe aspirant
- ✓ Passage des mains 390 mm, ou à définir
- ✓ Travail au-dessus du produit grâce à la protection de la vitre

## Quelques exemples de fabrication sur mesure

